
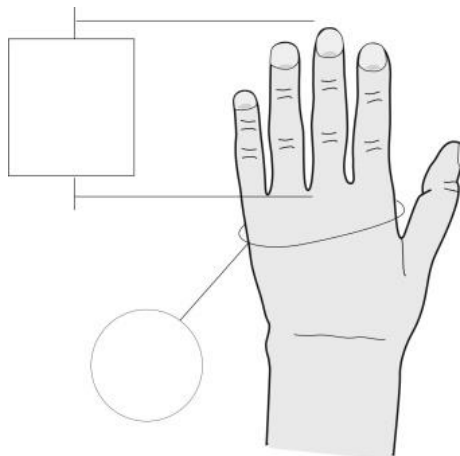
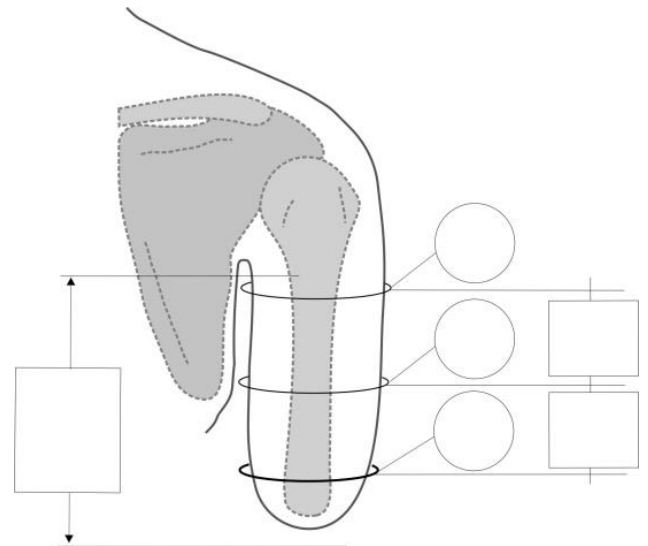



Maßblatt transhumerales Amputation

Techniker/in:	Datum:
Anwender/in:	Amputation: rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>

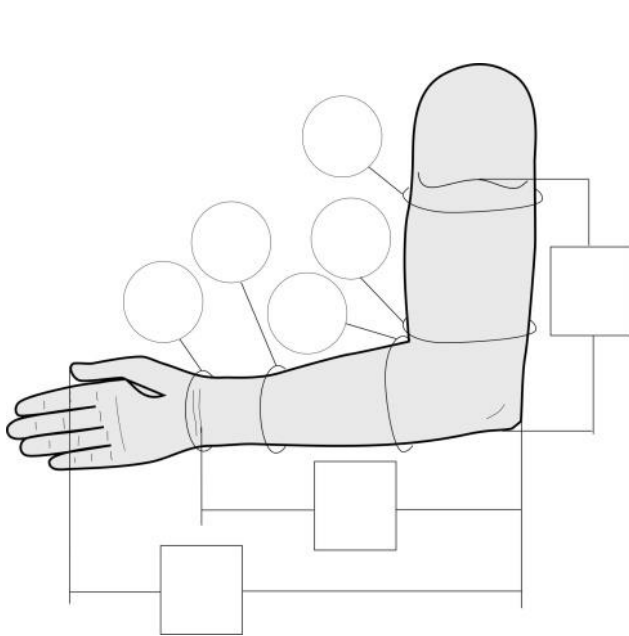

Maßblatt Kraftzug: Hybridbandage mit Ringverteilung

Techniker/in:	Datum:
Anwender/in:	Amputation: rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>

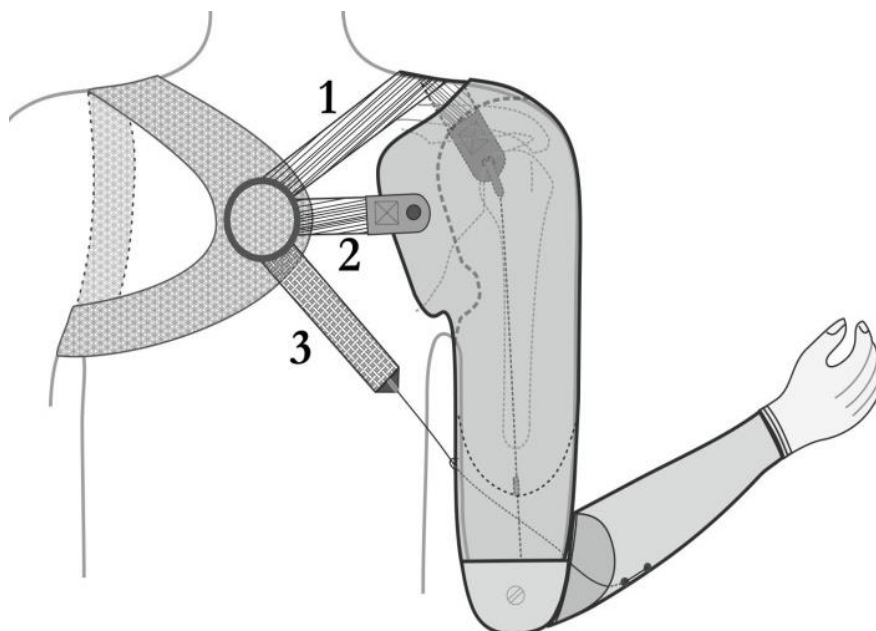

Beschreibung und Längenmaße der Züge

1. Sperrzug: Vom oberen Ring ausgehend bis zur vorderen Abstemmplatte (Zentrum des Oberarmkopfes); der Kraftzug (Perlonkabel) verläuft zum Prothesengelenk. Material: elastischer Doppelgummigurt mit innenliegendem Kraftzug (Perlonkabel).	cm
2. Rückenzug: Vom mittleren Ring ausgehend bis zur hinteren Abstemmplatte (Pelotten/Zentrum des Oberarmkopfes). Material: elastischer Doppelgummigurt.	cm
3. Beugezug: Vom unteren Anteil des Ringes ausgehend schräg nach unten bis zur Axillarlinie der Prothesenseite; der Kraftzug (Perlonkabel) entspringt aus dem Kabelzugverbinder und verläuft bis ca. zur Mitte des prothesenseitigen Unterarms. Material: nicht elastischer Bandagengurt.	cm